

Profiel van kwalificatiedossier:

Medewerkers steriele medische hulpmiddelen

Crebonr. 23412

» Medewerker steriele medische hulpmiddelen (Crebonr. 27030)

Versie

Gewijzigd 2025

Geldig vanaf

01-08-2025

Opleidingsdomein

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek (Crebonr. 79030)

Penvoerder: Sectorkamer specialistisch vakmanschap
Gevalideerd door: Sectorkamer specialistisch vakmanschap
Op: 10-09-2024

Inhoudsopgave

Leeswijzer	4
Overzicht van het kwalificatiedossier	5
Basisdeel	7
1. Beroepsspecifieke onderdelen	7
B1-K1: Reinigt, desinfecteert en steriliseert reusable medische hulpmiddelen	7
B1-K1-W1: Sorteert, demonteert en reinigt de medische hulpmiddelen (handmatig) voor	8
B1-K1-W2: Reinigt en desinfecteert medische hulpmiddelen	9
B1-K1-W3: Geeft gereinigde en gedesinfecteerde medische hulpmiddelen vrij	9
B1-K1-W4: Controleert, monteert en onderhoudt medische hulpmiddelen	10
B1-K1-W5: Stelt sets samen en verpakt de medische hulpmiddelen voor sterilisatie	10
B1-K1-W6: Stelt beladingen samen en steriliseert medische hulpmiddelen	11
B1-K1-W7: Geeft gesteriliseerde medische hulpmiddelen vrij	11
B1-K1-W8: Beheert en controleert de technische staat van de machines	11
B1-K2: Reinigt en desinfecteert flexibele endoscopen	13
B1-K2-W1: Demonteert, sorteert en reinigt flexibele endoscopen handmatig voor	13
B1-K2-W2: Reinigt en desinfecteert (onderdelen van) flexibele endoscopen	14
B1-K2-W3: Geeft gereinigde en gedesinfecteerde flexibele endoscopen vrij	14
B1-K2-W4: Beheert en controleert flexibele endoscopen en machines	15
B1-K3: Voert logistieke taken uit	16
B1-K3-W1: Verzamelt en transporteert medische hulpmiddelen van en naar de klant	16
B1-K3-W2: Borgt en bewaakt de kwaliteit van de voorraad medische hulpmiddelen	17
B1-K3-W3: Werkt mee aan het uitvoeren van recall-procedures	17
B1-K4: Voert professiegebonden taken uit	18
B1-K4-W1: Geeft informatie over de werkzaamheden	18
B1-K4-W2: Werkt aan deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering	19
2. Generieke onderdelen	20
Profieldeel	21
P1: Medewerker steriele medische hulpmiddelen	21

Leeswijzer


Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding.

Opbouw dossier

Dit kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere mbo-beroepen en bestaat uit:

1. Het **basisdeel** (B), dat gevormd wordt door:
 - a. De beroepsspecifieke onderdelen. Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatie - dossier.
 - b. De generieke onderdelen. De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de onderdelen:
Nederlandse taal;
rekenen;
loopbaan en burgerschap; en
voor zover het niveau 4 betreft: Engels.
2. Het **profieldeel** (P). Profielen bestaan uit kerntaken (K) en werkprocessen (W) waarop de kwalificaties in dit kwalificatiedossier van elkaar verschillen.

De beroepsopleiding in het mbo is gebaseerd op een kwalificatie en één of meer **keuzedelen** (D). Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding. De beschikbare keuzedelen voor dit kwalificatiedossier zijn te vinden op <https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl>. Op deze website staat het overzicht met alle keuzedelen.

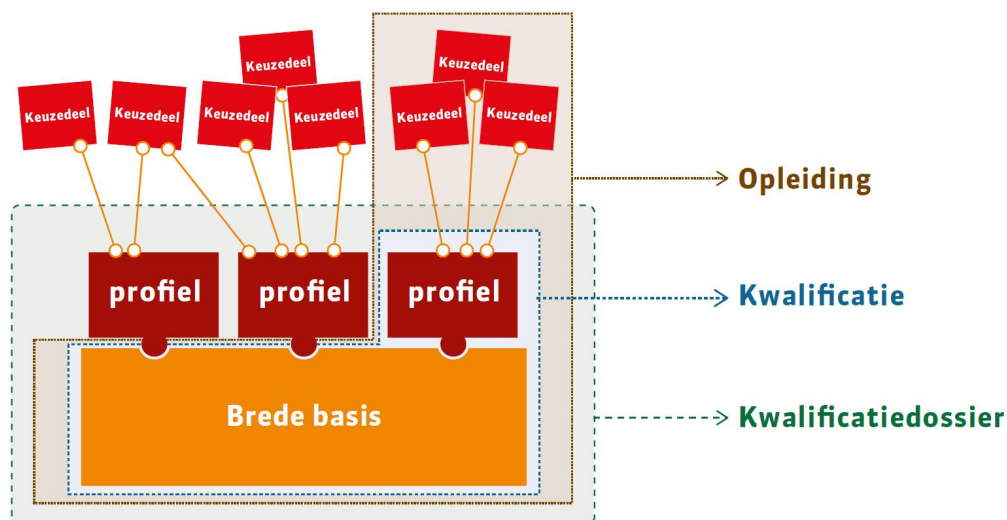

Taal en rekenen

De generieke kwalificatie-eisen voor taal en rekenen zijn benoemd in het basisdeel. Als sprake is van beroepsspecifieke taal- en rekeneisen is dit aangegeven in de kolom 'vakken en vaardigheden'. Daarnaast kan in de kolom 'gedrag' een extra verduidelijking aangegeven zijn hoe deze beroepsspecifieke taal- en rekeneisen worden ingezet in een werkproces.

Verantwoordingsinformatie

Aanvullende (verantwoordings-)informatie bij dit kwalificatiedossier is te vinden op <https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl>. Deze informatie is geen onderdeel van het kwalificatiedossier.

Overzicht van het kwalificatiedossier

Naam profiel	Mbo-niveau (EQF-niveau)	Beroepsvereisten	Typering van de kwalificatie
P1 Medewerker steriele medische hulpmiddelen	3	Nee	vakopleiding

B1-K1 Reinigt, desinfecteert en steriliseert reusable medische hulpmiddelen	B1-K1-W1	Sorteert, demonteert en reinigt de medische hulpmiddelen (handmatig) voor
	B1-K1-W2	Reinigt en desinfecteert medische hulpmiddelen
	B1-K1-W3	Geeft gereinigde en gedesinfecteerde medische hulpmiddelen vrij
	B1-K1-W4	Controleert, monteert en onderhoudt medische hulpmiddelen
	B1-K1-W5	Stelt sets samen en verpakt de medische hulpmiddelen voor sterilisatie
	B1-K1-W6	Stelt beladingen samen en steriliseert medische hulpmiddelen
	B1-K1-W7	Geeft gesteriliseerde medische hulpmiddelen vrij
	B1-K1-W8	Beheert en controleert de technische staat van de machines

B1-K2 Reinigt en desinfecteert flexibele endoscopen	B1-K2-W1	Demonteert, sorteert en reinigt flexibele endoscopen handmatig voor
	B1-K2-W2	Reinigt en desinfecteert (onderdelen van) flexibele endoscopen
	B1-K2-W3	Geeft gereinigde en gedesinfecteerde flexibele endoscopen vrij
	B1-K2-W4	Beheert en controleert flexibele endoscopen en machines

B1-K3 Voert logistieke taken uit	B1-K3-W1	Verzamelt en transporteert medische hulpmiddelen van en naar de klant
	B1-K3-W2	Borgt en bewaakt de kwaliteit van de voorraad medische hulpmiddelen
	B1-K3-W3	Werkt mee aan het uitvoeren van recall-procedures

B1-K4 Voert professiegebonden taken uit	B1-K4-W1	Geeft informatie over de werkzaamheden
	B1-K4-W2	Werkt aan deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering

Profieldeel

De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende (specifieke) kerntaken en werkprocessen:

P1	Medewerker steriele medische hulpmiddelen
----	---

Geen extra kerntaken en werkprocessen

Basisdeel

1. Beroepsspecifieke onderdelen

Typering van de beroepengroep

Context

De beginnend beroepsbeoefenaar is werkzaam op de centrale sterilisatie afdeling (CSA) of een afdeling reiniging en desinfectie endoscopen van een ziekenhuis. Daarnaast kan de beginnend beroepsbeoefenaar werken in een extern sterilisatiebedrijf dat wordt ingezet door ziekenhuizen, klinieken, onderzoekscentra etc. Deze afdelingen/ het externe sterilisatiebedrijf werken direct ondersteunend aan het primaire proces: de behandeling van patiënten door professionals. Het werk van de beginnend beroepsbeoefenaar is daarom van essentieel belang voor het functioneren van zorginstellingen.

De afdeling of het bedrijf heeft een besloten karakter vanwege de voorzorgsmaatregelen die genomen zijn om het infectierisico te minimaliseren. De afdeling of het bedrijf bestaat altijd uit minimaal twee strikt van elkaar gescheiden ruimtes: de reiniging- en desinfectieruimte en de 'schone ruimte'. In de eerste ruimte worden de gebruikte medische hulpmiddelen zoals instrumentarium en (flexibele) endoscopen binnengebracht, gereinigd en gedesinfecteerd. Er gelden strikte kleding- en hygiënevoorschriften met als doel een besmetting van medewerkers en omgeving te voorkomen. In de tweede ruimte zijn de medische hulpmiddelen gereinigd en gedesinfecteerd en worden ze verder gereed gemaakt voor het sterilisatieproces of opslag. De medische hulpmiddelen zijn hier zonder gevaar voor de gezondheid met de handen aan te raken. Wel gelden ook in deze ruimte kleding- en hygiënevoorschriften. Na sterilisatie komen de medische hulpmiddelen in een ruimte waar de eindcontrole en vrijgifte plaatsvindt en van waaruit ze gedistribueerd worden. Eventueel worden de (reusable en disposable) medische hulpmiddelen in deze ruimte opgeslagen. De opslagruimte voldoet daarom aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot luchtbehandeling en dergelijke.

Typerende beroepshouding

De beginnend beroepsbeoefenaar kan nauwkeurig, methodisch en volgens de protocollen en de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen werken. De beginnend beroepsbeoefenaar is zich daarbij bewust van diens verantwoordelijkheid in het waarborgen van de veiligheid en sterilisatie van de medische hulpmiddelen en het voorkomen van besmetting van ziektes/bacteriën bij zichzelf, collega's, patiënten en gebruikers van de medische hulpmiddelen. De beginnend beroepsbeoefenaar is daarom kritisch ten aanzien van de eigen werkzaamheden en die van anderen.

De beginnend beroepsbeoefenaar is klantgericht en kan flexibel inspringen op onverwachte situaties. Daarbij is de beginnend beroepsbeoefenaar stressbestendig en kan die prioriteiten stellen. Ook kan de beginnend beroepsbeoefenaar zich aanpassen aan het werken in wisselende diensten.

De beginnend beroepsbeoefenaar is communicatief en sociaal vaardig in de samenwerking met interne en externe klanten (zoals de medewerkers van de OK, de verpleegafdelingen en de poliklinieken)*. De beginnend beroepsbeoefenaar kan in teamverband werken en is zich bewust van het belang van een goed functionerend team. De beginnend beroepsbeoefenaar is digitaal vaardig en zorgvuldig in de (verplichte) registratie van de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken van de medische hulpmiddelen.

*In het kwalificatiedossier wordt de term klant gebruikt.

Resultaat van de beroepengroep

De reiniging, desinfectie, sterilisatie, controle, opslag, transport, distributie en registratie van medische hulpmiddelen is conform opdracht en protocollen uitgevoerd.

B1-K1: Reinigt, desinfecteert en steriliseert reusable medische hulpmiddelen

Complexiteit

Het werk van de beginnend beroepsbeoefenaar dient altijd volgens standaard werkwijzen en strikte kwaliteitseisen uitgevoerd te worden vanwege het afbreukrisico. Het niet op juiste wijze behandelen van medische hulpmiddelen betekent gezondheidsgevaar voor de beginnend beroepsbeoefenaar zelf, de patiënten, collega's en gebruikers van de medische hulpmiddelen. Daarnaast kan het leiden tot aanzienlijke financiële schade wanneer een instrument onbruikbaar wordt en opnieuw aangeschaft moet worden of wanneer daardoor een noodzakelijke medische

B1-K1: Reinigt, desinfecteert en steriliseert reusable medische hulpmiddelen

behandeling in gevaar komt. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt daarom te allen tijde volgens de geldende protocollen, werkinstructies en de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen. Er kunnen zich wel ieder moment onverwachte situaties voordoen zoals spoed en calamiteiten. De beginnend beroepsbeoefenaar moet klantvriendelijk handelen zonder van de protocollen, werkinstructies en beroepscode af te wijken. Het werk wordt daarnaast complexer door technische ontwikkelingen zoals de toepassing van robotinstrumentarium.

De beginnend beroepsbeoefenaar moet (specialistische) kennis en vaardigheden hebben van diverse aspecten met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en steriliseren van reusable medische hulpmiddelen.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig op uitvoerend niveau, is verantwoordelijk voor het eigen werk en werkt volgens protocollen, werkinstructies en de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen. Binnen die kaders kan de beginnend beroepsbeoefenaar na overleg met de leidinggevende en/of een gediplomeerde collega handelen bij onverwachte omstandigheden zoals spoed en/of bijzondere situaties. De beginnend beroepsbeoefenaar legt verantwoording af aan de leidinggevende.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- heeft basiskennis van anatomie, fysiologie en pathologie relevant voor de behandeling van de medische hulpmiddelen
- heeft kennis van fysica en chemie relevant voor het reinigings-, desinfectie- en sterilisatieproces
- heeft kennis van een instrumentenvolgsysteem
- heeft kennis van werking en controlesystemen van reinigings- en desinfectieapparatuur
- heeft kennis van werking en controlesystemen van sterilisatieapparatuur
- heeft kennis van functie, werking en het doel van valideren van instrumenten zoals reiniging-desinfectiemachine, sealapparaat en autoclaaf
- heeft specialistische kennis van functie, werking en behandeling van medische hulpmiddelen
- heeft kennis van hygiëne en het beperken van risico's op besmetting
- heeft kennis van medische terminologie
- heeft kennis van symbolen met betrekking tot het reinigen en desinfecteren
- heeft kennis van symbolen met betrekking tot steriliteit en verpakkingen
- heeft kennis van verpakkingssystemen voor sterilisatie
- heeft kennis van verschillende reinigings-, desinfectie- en sterilisatiemethoden van steriele medische hulpmiddelen
- heeft basiskennis van microbiologie
- heeft kennis van duurzaamheid in relatie tot reinigings-, desinfectie- en sterilisatiewerkzaamheden
- kan de protocollen, werkinstructies en de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen toepassen
- kan digitale vaardigheden toepassen bij de werkzaamheden
- kan medische hulpmiddelen op het gebied van minimaal invasieve chirurgie, micro-instrumentarium en boor- en zaagapparatuur reinigen, desinfecteren en indien van toepassing steriliseren
- kan de medische hulpmiddelen van de volgende specialismen reinigen, desinfecteren en steriliseren: orthopedie/ traumatologie, keel- neus- en oorheeskunde, gynaecologie, algemene chirurgie, urologie en robotchirurgie
- kan de medische hulpmiddelen van tenminste twee van de volgende specialismen reinigen, desinfecteren en steriliseren: mond- en kaakchirurgie, plastische chirurgie, oogheeskunde, neurochirurgie, cardiochirurgie, robotchirurgie, trauma en kinderchirurgie

B1-K1-W1: Sorteert, demonteert en reinigt de medische hulpmiddelen (handmatig) voor

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar maakt zich gereed voor de werkzaamheden. De beginnend beroepsbeoefenaar sorteert vervolgens binnengekomen medische hulpmiddelen op reinigings- en desinfectiemethode. De beginnend beroepsbeoefenaar demonteert de medische hulpmiddelen en reinigt de onderdelen (handmatig) voor.

Resultaat

De medische hulpmiddelen zijn gesorteerd, gedemonteerd en (handmatig) voorgereinigd.

B1-K1-W1: Sorteert, demonteert en reinigt de medische hulpmiddelen (handmatig) voor

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- past de hygiëne- en kledingvoorschriften zorgvuldig toe;
- gebruikt diens kennis van medische hulpmiddelen om ze te sorteren op reinigings- en desinfectiemethode;
- gebruikt materialen en middelen zorgvuldig;
- voert de werkzaamheden op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het sorteren, demonteren en (handmatig) voorreinigen volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies.

De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen, Kwaliteit leveren

B1-K1-W2: Reinigt en desinfecteert medische hulpmiddelen

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar stelt beladingen samen naar reinigings- en desinfectiemethode. De beginnend beroepsbeoefenaar belaad de machine zo dat de medische hulpmiddelen goed gereinigd kunnen worden en kiest het reinigings- en desinfectieprogramma. De medische hulpmiddelen die niet machinaal gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden, worden handmatig gereinigd en gedesinfecteerd. De beginnend beroepsbeoefenaar registreert welke medische hulpmiddelen in welke reiniging-desinfectiemachine zitten en welk programma geselecteerd is.

Resultaat

De medische hulpmiddelen zijn machinaal of handmatig gereinigd en gedesinfecteerd volgens de juiste methode. Het reinigings- en desinfectieproces is voor ieder medisch hulpmiddel herleidbaar.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- kiest zorgvuldig de juiste hulpstukken voor het aansluiten van de medische hulpmiddelen;
- voert de werkzaamheden op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het samenstellen en het reinigen en desinfecteren volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies;
- registreert gegevens accuraat.

De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Instructies en procedures opvolgen, Kwaliteit leveren

B1-K1-W3: Geeft gereinigde en gedesinfecteerde medische hulpmiddelen vrij

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar ontlaadt de reiniging-desinfectiemachine. De beginnend beroepsbeoefenaar controleert of het juiste programma is doorlopen en/of het reinigings- en desinfectieproces juist is verlopen. De beginnend beroepsbeoefenaar beoordeelt de procesgegevens die de machine genereert en voert een visuele controle uit. Indien de beginnend beroepsbeoefenaar constateert dat het proces juist verlopen is, accordeert die het proces waarmee die de medische hulpmiddelen vrijgeeft voor verdere verwerking. Indien de beginnend beroepsbeoefenaar constateert dat het proces niet juist verlopen is, zorgt die ervoor dat de betreffende medische hulpmiddelen opnieuw gereinigd en gedesinfecteerd worden. De beginnend beroepsbeoefenaar registreert het doorlopen proces en de resultaten.

Resultaat

De medische hulpmiddelen zijn gecontroleerd op reinigings- en desinfectieprogramma, op het verloop van het reinigings- en desinfectieproces en visueel gecontroleerd. De op juiste wijze gereinigde en gedesinfecteerde medische hulpmiddelen zijn vrijgegeven voor de volgende fase.

B1-K1-W3: Geeft gereinigde en gedesinfecteerde medische hulpmiddelen vrij

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- neemt een duidelijke en onderbouwde beslissing om gereinigde en gedesinfecteerde medische hulpmiddelen al dan niet vrij te geven op basis van de procesgegevens en de visuele controle;
- voert de werkzaamheden op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het controleren en vrijgeven volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies;
- voert de visuele controle en beoordeling van procesgegevens deskundig uit;
- registreert de vrijgifte van de medische hulpmiddelen nauwkeurig.

De onderliggende competenties zijn: Beslissen en activiteiten initiëren, Formuleren en rapporteren, Instructies en procedures opvolgen, Kwaliteit leveren

B1-K1-W4: Controleert, monteert en onderhoudt medische hulpmiddelen

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar controleert of de medische hulpmiddelen schoon zijn en test of zij naar behoren functioneren, zoals schachten, lichtkabels en diathermiekabels. De beginnend beroepsbeoefenaar monteert de medische hulpmiddelen zodat zij in sets kunnen worden samengesteld. Zo nodig verricht de beginnend beroepsbeoefenaar onderhoud aan medische hulpmiddelen, zoals het oliën.

Resultaat

De medische hulpmiddelen zijn schoon, functioneren naar behoren en zijn gemonteerd.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- gebruikt benodigde materialen en middelen zorgvuldig;
- voert de werkzaamheden op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het controleren, monteren en onderhouden volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies.

De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen, Kwaliteit leveren

B1-K1-W5: Stelt sets samen en verpakt de medische hulpmiddelen voor sterilisatie

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar leest uit de instructie af welk soort medische hulpmiddelen in welke aantallen en maten per set aanwezig moeten zijn en stelt sets samen. De beginnend beroepsbeoefenaar verpakt de samengestelde sets en het losse instrumentarium met het verpakkingsmateriaal en volgens de voorgeschreven verpakkingsmethode, rekening houdend met de sterilisatiemethode.

Resultaat

De sets met medische hulpmiddelen zijn samengesteld (compleet en met de juiste hulpmiddelen). De sets en het los instrumentarium zijn verpakt in de juiste sterilisatieverpakking.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- gebruikt benodigde materialen en middelen zorgvuldig;
- voert de werkzaamheden op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het samenstellen en verpakken volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies.

De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen

B1-K1-W6: Stelt beladingen samen en steriliseert medische hulpmiddelen

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar stelt de beladingen samen naar sterilisatiemethode. De beginnend beroepsbeoefenaar beladde de machine, kiest het sterilisatieprogramma en start de sterilisator. De beginnend beroepsbeoefenaar registreert welke sets/medische hulpmiddelen in welke sterilisator gesteriliseerd worden en welk programma geselecteerd is.

Resultaat

De beladingen worden gesteriliseerd volgens de juiste methode en het sterilisatieproces is voor iedere set/medisch hulpmiddel herleidbaar.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- selecteert op basis van diens kennis de juiste sterilisatiemethode en het juiste sterilisatieprogramma;
- voert de werkzaamheden op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het samenstellen van de beladingen en het steriliseren volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies;
- registreert gegevens nauwkeurig.

De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Instructies en procedures opvolgen, Kwaliteit leveren

B1-K1-W7: Geeft gesteriliseerde medische hulpmiddelen vrij

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar ontlaadt de sterilisator en laadt deze uitwasemen. De beginnend beroepsbeoefenaar controleert of de verpakkingen intact, schoon en droog zijn en of de indicatoren zijn omgeslagen. De beginnend beroepsbeoefenaar controleert of het juiste sterilisatieprogramma doorlopen is aan de hand van de procesgegevens die de machine genereert en voert een visuele controle uit. Indien de beginnend beroepsbeoefenaar constateert dat het proces juist verlopen is, accordeert die het proces. Indien de beginnend beroepsbeoefenaar constateert dat het proces niet juist verlopen is, zorgt die ervoor dat de betreffende medische hulpmiddelen hergesteriliseerd worden of dat ze in quarantaine worden geplaatst. De beginnend beroepsbeoefenaar registreert het doorlopen proces en het resultaat.

Resultaat

Er is gecontroleerd of de verpakkingen aan de eisen voldoen en of het juiste sterilisatieprogramma doorlopen is. De op juiste wijze gesteriliseerde medische hulpmiddelen zijn vrijgegeven voor gebruik en de afgekeurde medische hulpmiddelen zijn aangeboden voor hersterilisatie of in quarantaine geplaatst.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- neemt een duidelijke en onderbouwde beslissing om gesteriliseerde medische hulpmiddelen al dan niet vrij te geven op basis van de procesgegevens en de visuele controle;
- registreert de vrijgifte nauwkeurig;
- voert de werkzaamheden op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het controleren en vrijgeven volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies.

De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Instructies en procedures opvolgen, Kwaliteit leveren, Beslissen en activiteiten initiëren

B1-K1-W8: Beheert en controleert de technische staat van de machines

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar voert de (dagelijkse) controles aan de machines en de verbruiksmaterialen uit bij de dagstart, zoals de sealcheck, de stoompenetratietest, de lekttest, de controles van de reiniging-desinfectiemachines en de karrenwas en het ultrasoon opstarten en ontluchten. De beginnend beroepsbeoefenaar houdt de machines schoon zoals het reinigen van de filters van de reiniging-desinfectiemachine en verricht

B1-K1-W8: Beheert en controleert de technische staat van de machines

eenvoudige onderhoudswerkzaamheden. De beginnend beroepsbeoefenaar signaleert en meldt storingen en defecten aan de machines aan de verantwoordelijke.

Resultaat

De machines zijn gebruiksklaar en gecontroleerd en de continuïteit van de werkzaamheden voor het sterilisatieproces is geborgd.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- toont technisch inzicht in de machines;
- voert accuraat handmatige handelingen uit;
- signaleert en meldt storingen en defecten tijdig bij de juiste verantwoordelijke;
- voert de werkzaamheden op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het controleren, onderhouden en schoonmaken volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies.

De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen

B1-K2: Reinigt en desinfecteert flexibele endoscopen

Complexiteit

Het werk van de beginnend beroepsbeoefenaar dient altijd volgens standaard werkwijzen en strikte kwaliteitseisen uitgevoerd te worden vanwege het afbreukrisico. Flexibele endoscopen worden vaak gebruikt voor zowel diagnostiek als behandeling. Het zijn ingenieuze en complexe instrumenten die bij gebruik vervuild raken met zowel patiëntmateriaal als micro-organismen. Als een endoscoop na gebruik niet adequaat wordt gereinigd en gedesinfecteerd, kan dat leiden tot onnodige risico's bij een volgende patiënt, zoals een besmetting of infectie. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt daarom te allen tijde volgens de geldende protocollen, werkinstructies en de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen. Er kunnen zich wel ieder moment onverwachte situaties voordoen zoals spoed en calamiteiten. De beginnend beroepsbeoefenaar moet klantvriendelijk handelen zonder van de protocollen, werkinstructies en beroepscode af te wijken.

De beginnend beroepsbeoefenaar moet (specialistische) kennis en vaardigheden hebben van diverse aspecten met betrekking tot het (de)monteren, reinigen en desinfecteren van flexibele endoscopen.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig op uitvoerend niveau, is verantwoordelijk voor het eigen werk en werkt volgens protocollen, werkinstructies en de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen. Binnen die kaders kan de beginnend beroepsbeoefenaar na overleg met de leidinggevende en/of een gediplomeerde collega handelen bij onverwachte omstandigheden zoals spoed en/of bijzondere situaties. De beginnend beroepsbeoefenaar legt verantwoording af aan de leidinggevende.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- heeft basiskennis van anatomie, fysiologie en pathologie relevant voor de behandeling van flexibele endoscopen
- heeft kennis van fysica en chemie relevant voor het reinigings- en desinfectieproces
- heeft kennis van een instrumentenvolgsysteem
- heeft kennis van werking en controlesystemen van reinigings- en desinfectieapparatuur
- heeft kennis van infectieel en de besmettingsketen met betrekking tot werkzaamheden rondom flexibele endoscopen
- heeft kennis van functie, werking en doel van valideren van instrumenten zoals reiniging-desinfectiemachine voor flexibele endoscopen, droogkast en plofkast
- heeft specialistische kennis van functie, werking en behandeling van flexibele endoscopen
- heeft kennis van medische terminologie
- heeft kennis van symbolen met betrekking tot het reinigen en desinfecteren
- heeft kennis van verschillende reinigings- en desinfectiemethoden en technieken van flexibele endoscopen
- heeft kennis van de werkwijze bij het afnemen van een kweek van flexibele endoscopen/reiniging-desinfectiemachine voor flexibele endoscopen
- heeft basiskennis van microbiologie
- heeft kennis van duurzaamheid in relatie tot reinigings- en desinfectiewerkzaamheden
- kan de protocollen, werkinstructies en de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen toepassen
- kan digitale vaardigheden toepassen bij de werkzaamheden
- kan afwijkingen van flexibele endoscopen herkennen en daarnaar handelen

B1-K2-W1: Demonteert, sorteert en reinigt flexibele endoscopen handmatig voor

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar maakt zich gereed voor de werkzaamheden. De beginnend beroepsbeoefenaar demonteert vervolgens de binnengekomen flexibele endoscopen, controleert ze door bijvoorbeeld het uitvoeren van de lektest en sorteert ze op reinigings- en desinfectiemethode. De beginnend beroepsbeoefenaar verzamelt vervolgens de benodigde attributen voor de handmatige reiniging en reinigt de onderdelen van de flexibele scopen voor.

Resultaat

De flexibele scopen zijn gedemonteerd, gesorteerd, gecontroleerd en voorgereinigd.

B1-K2-W1: Demonteert, sorteert en reinigt flexibele endoscopen handmatig voor

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- past de hygiëne- en kledingvoorschriften zorgvuldig toe;
- gebruikt diens kennis van flexibele endoscopen om ze te sorteren op reinigings- en desinfectiemethode;
- gebruikt materialen en middelen zorgvuldig;
- voert de werkzaamheden op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het demonteren, sorteren en voorreinigen volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies.

De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen, Vakdeskundigheid toepassen

B1-K2-W2: Reinigt en desinfecteert (onderdelen van) flexibele endoscopen

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar plaatst (onderdelen van) de flexibele endoscopen in de machine, sluit ze aan en gebruikt hiervoor passende hulpstukken. De beginnend beroepsbeoefenaar start het reinigings- en desinfectieprogramma, registreert de start van het programma en welke (onderdelen van) flexibele endoscopen in de machine geplaatst zijn. Na afloop van het programma controleert de beginnend beroepsbeoefenaar visueel of (onderdelen van) de flexibele endoscopen schoon zijn en beoordeelt de procesgegevens. De beginnend beroepsbeoefenaar plaatst (onderdelen van) de flexibele endoscopen vervolgens in de droogkast en sluit ze aan. De beginnend beroepsbeoefenaar registreert het doorlopen proces.

Resultaat

(Onderdelen van) de flexibele endoscopen zijn machinaal gereinigd en gedesinfecteerd volgens de juiste methode. Het desinfectieproces is voor ieder (onderdeel van) flexibele endoscoop herleidbaar.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- kiest zorgvuldig de juiste hulpstukken voor het aansluiten van (onderdelen van) de flexibele endoscopen;
- voert het plaatsen en aansluiten van (onderdelen van) de flexibele endoscopen in de machine op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het reinigen en desinfecteren volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies;
- voert de visuele controle en beoordeling van procesgegevens deskundig uit;
- registreert gegevens accuraat.

De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen, Materialen en middelen inzetten

B1-K2-W3: Geeft gereinigde en gedesinfecteerde flexibele endoscopen vrij

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar haalt (onderdelen van) de flexibele endoscopen uit de droogkast, controleert en monteert ze en plaatst ze in aparte bakken. De beginnend beroepsbeoefenaar zoekt de passende attributen erbij, zoals ventielen, en plaatst deze tevens in de bak. De beginnend beroepsbeoefenaar registreert de uitgevoerde werkzaamheden en de status van de flexibele endoscopen. De flexibele endoscopen kunnen droog (uit de droogkast) en nat worden uitgegeven. In het laatste geval moeten de flexibele endoscopen binnen 4 uur worden gebruikt. Indien de tijd verstreken is, worden de betreffende flexibele endoscopen weer gereinigd en gedesinfecteerd.

Resultaat

De gereinigde en gedesinfecteerde flexibele endoscopen zijn vrijgegeven voor gebruik. De status van de flexibele endoscopen is geregistreerd.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- neemt een duidelijke en onderbouwde beslissing om de gereinigde en gedesinfecteerde endoscopen al dan niet vrij te geven op basis van de status van de endoscopen en de procesgegevens;

B1-K2-W3: Geeft gereinigde en gedesinfecteerde flexibele endoscopen vrij

- voert de werkzaamheden op efficiënte wijze uit;
- registreert de vrijgifte en de status van de flexibele endoscopen nauwkeurig;
- werkt bij het controleren, monteren en vrijgeven volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies.

De onderliggende competenties zijn: Beslissen en activiteiten initiëren, Formuleren en rapporteren, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen

B1-K2-W4: Beheert en controleert flexibele endoscopen en machines

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar voert de dagelijkse controles aan de machines en de verbruiksmaterialen uit bij de dagstart, zoals de zelfdesinfectie, de flow van de droogkast en de plofkast. De beginnend beroepsbeoefenaar controleert retour ontvangen (gerepareerde) flexibele endoscopen op reusable en disposable onderdelen. De beginnend beroepsbeoefenaar houdt de machines schoon zoals het reinigen van de filters van de reiniging-desinfectiemachine voor flexibele endoscopen en verricht eenvoudige onderhoudswerkzaamheden. De beginnend beroepsbeoefenaar signaleert en meldt storingen en defecten aan de machines en flexibele endoscopen aan de verantwoordelijke.

Resultaat

De flexibele endoscopen zijn getest en gecontroleerd. De machines zijn gebruiksklaar en gecontroleerd en de continuïteit van de werkzaamheden voor het desinfectieproces is geborgd.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- toont technisch inzicht in de machines en de flexibele endoscopen;
- voert accuraat handmatige handelingen uit;
- signaleert en meldt storingen en defecten tijdig bij de juiste verantwoordelijke;
- voert de werkzaamheden op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het controleren, onderhouden en schoonmaken volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies.

De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen

B1-K3: Voert logistieke taken uit

Complexiteit

Het werk van de beginnend beroepsbeoefenaar dient altijd volgens standaardwerkwijzen en strikte kwaliteitseisen uitgevoerd te worden vanwege de risico's op besmetting van ziektes/bacteriën bij zichzelf, collega's, patiënten en gebruikers van de medische hulpmiddelen. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt daarom te allen tijde volgens de protocollen, werkinstructies en de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen. In onverwachte situaties, bijvoorbeeld bij spoedvragen, moet die klantgericht en/of onder tijdsdruk handelen zonder van de protocollen, werkinstructies en beroepscode af te wijken. De beginnend beroepsbeoefenaar beschikt over kennis van transport en beheer van medische hulpmiddelen.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt op uitvoerend niveau. De beginnend beroepsbeoefenaar voert diens werk zelfstandig uit en is verantwoordelijk voor het eigen werk. De beginnend beroepsbeoefenaar legt verantwoording af aan diens leidinggevende over de werkzaamheden.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- heeft kennis van relevante digitale systemen zoals een voorraadsysteem en/of een instrumentenvolgsysteem
- heeft kennis van disposable medische hulpmiddelen
- heeft basiskennis van logistieke begrippen
- heeft kennis van hygiëne en het beperken van risico's op besmetting
- heeft kennis van medische terminologie
- heeft kennis van symbolen met betrekking tot steriliteit en verpakkingen
- heeft kennis van (interne) transportmiddelen en -methodes
- heeft kennis van verpakkingssystemen voor sterilisatie
- heeft kennis van traceerbaarheid en houdbaarheid van reusable medische hulpmiddelen
- heeft kennis van recall procedures
- heeft kennis van duurzaamheid in relatie tot logistieke werkzaamheden
- kan de protocollen, werkinstructies en de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen toepassen
- kan digitale vaardigheden toepassen bij de werkzaamheden
- kan communicatieve vaardigheden toepassen in contact met collega's, klanten en derden

B1-K3-W1: Verzamelt en transporteert medische hulpmiddelen van en naar de klant

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar transporteert medische hulpmiddelen van en naar de klant. Voorafgaande aan het proces van sterilisatie en/of desinfectie haalt die de vuile reusable medische hulpmiddelen op bij de klant en verzamelt deze in transportmiddelen voor vuil transport. Vervolgens transporteert die de reusable medische hulpmiddelen naar de sterilisatieafdeling. Bij het vuil transport zorgt die dat het besmettingsgevaar voor zichzelf, collega's, patiënten en klanten minimaal is. Na het proces van sterilisatie en/of desinfectie verzamelt die de steriele medische hulpmiddelen voor een klant en maakt ze klaar voor verzending. Bij het transport naar de klant werkt die op zo'n manier dat de steriliteit en/of kwaliteit van de medische hulpmiddelen behouden blijft. De beginnend beroepsbeoefenaar levert de medische hulpmiddelen af volgens de afspraken die met de klant zijn gemaakt.

Resultaat

De medische hulpmiddelen zijn verzameld en getransporteerd van en naar de klant.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- houdt de hygiëne voorschriften voortdurend in acht;
- voert het verzamelen en transporteren op efficiënte wijze uit;
- werkt bij het verzamelen en transporteren van medische hulpmiddelen volgens voorgeschreven protocollen en werkinstructies;
- houdt zich zorgvuldig aan de afspraken die met de klant zijn gemaakt.

De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Instructies en procedures opvolgen, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten

B1-K3-W2: Borgt en bewaakt de kwaliteit van de voorraad medische hulpmiddelen

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar pakt binnengekomen bestellingen van disposable en reusable medische hulpmiddelen uit, controleert de verpakking, expiratiedatum en hoeveelheden aan de hand van bestellijsten, voegt de medische hulpmiddelen toe aan de voorraad en werkt het voorraadsysteem bij. Bij controle van de voorraad controleert de beginnend beroepsbeoefenaar de disposable en reusable medische hulpmiddelen op: zichtbaarheid van het etiket, staat van de verpakking, expiratiedatum, opslagconditie en hoeveelheden. De steriele medische hulpmiddelen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen haalt die uit de voorraad om opnieuw aan te bieden voor sterilisatie of reiniging en desinfectie (reusable medische hulpmiddelen) of voor afvoer (disposable medische hulpmiddelen). Op basis van de controle en inventarisatie werkt de beginnend beroepsbeoefenaar de fysieke voorraad en het voorraadsysteem bij. Waar nodig bestelt die medische hulpmiddelen aan de hand van de richtlijnen voor minimale en maximale voorraad en meldt (dreigende) tekorten en/of afwijkingen bij de leidinggevende.

Resultaat

Er is gecontroleerd of de steriele medische hulpmiddelen uit binnengekomen bestellingen of de voorraad voldoen aan de vereiste kwaliteit. De administratie is bijgewerkt en eventuele tekorten en/of afwijkingen zijn gemeld aan de leidinggevende.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- controleert nauwkeurig de expiratiedatum en of de verpakking intact is;
- sorteert de medische hulpmiddelen zorgvuldig op expiratiedatum volgens het systeem van de organisatie;
- past richtlijnen voor minimale en maximale voorraad nauwkeurig toe;
- werkt gestructureerd en in een efficiënte volgorde;
- werkt bij de kwaliteitscontroles volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies.

De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Kwaliteit leveren, Instructies en procedures opvolgen

B1-K3-W3: Werkt mee aan het uitvoeren van recall-procedures

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar voert in opdracht en in samenwerking met collega's een recall-procedure uit. De beginnend beroepsbeoefenaar verzamelt informatie over de medische hulpmiddelen die uit de circulatie gehaald moet worden en achterhaalt waar deze medische hulpmiddelen zich bevinden. De beginnend beroepsbeoefenaar haalt de medische hulpmiddelen terug en transporteert ze naar de sterilisatieafdeling. De beginnend beroepsbeoefenaar licht klanten toe waarom de recall-procedure moet worden uitgevoerd. De beginnend beroepsbeoefenaar registreert de ingenomen medische hulpmiddelen en rapporteert de verantwoordelijke voor de recall-procedure over het resultaat.

Resultaat

De recall-procedure is uitgevoerd, de betreffende medische hulpmiddelen zijn teruggehaald en geregistreerd. De verantwoordelijke voor de recall-procedure is geïnformeerd over het resultaat.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- voert de recall-procedure uit volgens de voorgeschreven protocollen en werkinstructies;
- werkt constructief samen met collega's bij de uitvoering van de recall-procedure;
- informeert klanten duidelijk en correct over de recall-procedure;
- registreert nauwkeurig welke medische hulpmiddelen uit de circulatie zijn gehaald;
- rapporteert volledig en duidelijk.

De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Overtuigen en beïnvloeden, Formuleren en rapporteren, Instructies en procedures opvolgen

B1-K4: Voert professiegebonden taken uit

Complexiteit

De beginnend beroepsbeoefenaar combineert kennis en inzichten over nieuwe ontwikkelingen en innovaties in het vakgebied, kwaliteitszorg en communicatieve vaardigheden om de eigen deskundigheid en de kwaliteit van het werk te ontwikkelen. De werkzaamheden zijn wisselend van aard. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft te maken met klanten, collega's en anderen in verschillende contexten, zoals één-op-één gesprekken, discussie- of werkgroepen of een rondleiding op de afdeling. De diversiteit van werkzaamheden en contexten maakt het werk complex. In alle situaties houdt de beginnend beroepsbeoefenaar zich aan de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen. Een andere complicerende factor is dat de technologische ontwikkelingen steeds verder gaan. De medische hulpmiddelen worden steeds fragieler en geavanceerder. Deze ontwikkelingen hebben effect op de werkzaamheden en de apparatuur waarmee gewerkt wordt, zoals reinigings- en desinfectiemachines en sterilisatietechnieken. Het vraagt een actieve houding van de beginnend beroepsbeoefenaar om de kennis van technologische ontwikkelingen op peil te houden.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eigen deskundigheid. In samenwerking met collega's is ze verantwoordelijk voor het uitwisselen van kennis, ideeën en voorstellen om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Verder is die verantwoordelijk voor de informatie die ze aan klanten en anderen geeft.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- heeft kennis van (technische) ontwikkelingen en innovaties in het vakgebied
- heeft kennis van actuele wet- en regelgeving om een veilig gebruik van medische hulpmiddelen te reguleren
- heeft kennis van de klachtenprocedure van de organisatie
- heeft kennis van het kwaliteitssysteem en bijbehorende procedures en protocollen
- heeft kennis van de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen
- kan gespreks- en vraagtechnieken toepassen
- kan communicatieve vaardigheden toepassen in contact met collega's, klanten en derden
- kan een voorlichting geven over de processen en werkzaamheden op diens afdeling
- kan reflecteren op het eigen functioneren

B1-K4-W1: Geeft informatie over de werkzaamheden

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar geeft informatie over de dagelijkse processen van reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische hulpmiddelen, bijvoorbeeld in een rondleiding voor nieuwe collega's of in een gesprek met een klant. De beginnend beroepsbeoefenaar licht de werkzaamheden toe en beantwoordt vragen. Bij klachten of specifieke vragen die de verantwoordelijkheid van de beginnend beroepsbeoefenaar overstijgen, noteert die de klacht of vraag voor de leidinggevende of verantwoordelijke collega.

Resultaat

Belanghebbenden zijn geïnformeerd over het proces van reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische hulpmiddelen. Eventuele specifieke vragen of klachten zijn genoteerd.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- geeft duidelijke en juiste informatie die aansluit bij de situatie;
- geeft door diens houding de ander(en) de ruimte om vragen te stellen of een klacht te verwoorden;
- luistert aandachtig naar de ander(en);
- houdt zich zorgvuldig aan de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen;
- noteert een vraag of klacht duidelijk en zorgvuldig;
- meldt klachten volgens de klachtenprocedure van de organisatie.

De onderliggende competenties zijn: Presenteren, Aandacht en begrip tonen, Formuleren en rapporteren, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, Instructies en procedures opvolgen, Ethisch en integer handelen

B1-K4-W2: Werkt aan deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering

Omschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt op verschillende manieren aan het ontwikkelen van de eigen deskundigheid en kwaliteitsverbetering. De beginnend beroepsbeoefenaar gebruikt informatiebronnen om technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden. In werkoverleggen en/of werkgroepen neemt die deel aan inhoudelijke discussies over gevolgen van ontwikkelingen voor de beroepsuitoefening en mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt samen met collega's aan voorstellen voor een kwaliteitsverbetering van de werkzaamheden. Daarnaast reflecteert die op eigen functioneren, vraagt feedback aan anderen en past diens handelen op basis hiervan aan.

Resultaat

De beginnend beroepsbeoefenaar is op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en heeft zich verder ontwikkeld. In overleggen of werkgroepen met collega's zijn kennis en ideeën gedeeld en is gewerkt aan voorstellen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de werkzaamheden van het team/de afdeling.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- volgt structureel ontwikkelingen in het vakgebied;
- neemt actief deel aan inhoudelijke discussies door diens kennis en ideeën te delen;
- levert een actieve bijdrage aan voorstellen voor een kwaliteitsverbetering van de werkzaamheden;
- gebruikt passend taal- en woordgebruik in werkoverleggen en/of werkgroepen;
- reflecteert eerlijk op eigen functioneren;
- houdt zich zorgvuldig aan de beroepscode Medewerker steriele medische hulpmiddelen;
- toont een open en lerende houding in contact met collega's.

De onderliggende competenties zijn: Leren, Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen, Ethisch en integer handelen

2. Generieke onderdelen

Elke kwalificatie kent - naast (beroepsgerichte) specifieke kwalificatie-eisen - ook generieke kwalificatie-eisen.

Nederlandse taal

Het generieke examenonderdeel Nederlandse taal maakt deel uit van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier. De referentieniveaus en de kwalificatie-eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit referentieniveau Nederlandse taal en rekenen. Deze bijlage is te vinden op <https://wetten.overheid.nl/BWBR0027879> en vormt integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.

Rekenen

Het generieke examenonderdeel rekenen maakt deel uit van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier. De referentieniveaus en de kwalificatie-eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in de bijlagen 2 en 3 bij het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Deze bijlage is te vinden op <https://wetten.overheid.nl/BWBR0027879> en vormt integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.

Loopbaan en burgerschap

Het generieke examenonderdeel loopbaan en burgerschap maakt deel uit van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier. De kwalificatie-eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Deze bijlage is te vinden op <https://wetten.overheid.nl/BWBR0027963> en vormt integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.

Profieldeel

P1 Medewerker steriele medische hulpmiddelen

Mbo-niveau

3

Typering van het beroep

De beroepstypering van de medewerker steriele medische hulpmiddelen komt overeen met de typering van de beroepengroep.

Beroepsvereisten

Nee